

Soins en Établissement Médico - Sociaux Gastro Endoscopique Percutanée (GEP)

fiche technique 2/2

En savoir plus :
www.cpias-grand-est.fr

Titre	Pose d'alimentation
Date	Version 0 - 2023

Préalable	Matériel nécessaire
<ul style="list-style-type: none"> • Environnement propre • Tenue de travail propre • Hygiène des mains : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pas de bijoux (alliance, bagues, bracelets, montres...) ◦ Pas de vernis, faux ongles ◦ Ongles courts (<1mm) • Friction hydro-alcoolique jusqu'à séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe • Poche d'alimentation (vérifier la date de péremption, l'intégrité de la poche, et l'aspect de l'alimentation) • Tubulure avec système de clampage • Seringue à Usage Unique (UU) et à résident unique de 50 ml • Verre d'eau à température ambiante (bouteille, fontaine)

Avant branchement	Branchement
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la prescription médicale • Avertir la personne accompagnée du soin réalisé • Vérifier que le ballonnet est bien contre la paroi abdominale par traction modérée • Surveiller le point d'insertion et alerter si nécessaire • Vérifier que la sonde n'est pas bouchée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Friction hydro-alcoolique jusqu'à séchage complet ◦ Prélever 50 ml d'eau à la seringue ◦ Injecter progressivement, il ne doit pas y avoir de résistance ◦ Si résistance, arrêter le soin et alerter • Connecter la poche d'alimentation à la tubulure et vérifier l'étanchéité du pas de vis • Purger la tubulure, clamper 	<ul style="list-style-type: none"> • Introduire la tubulure dans la pompe • Programmer la pompe selon prescription médicale (débit, volume) • Brancher la tubulure à la GEP et vérifier l'étanchéité du pas de vis • Transmissions dans le dossier de la personne accompagnée (mise en route de l'alimentation, surveillance)
	Débrancher
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon écoulement de l'alimentation • Débrancher • Procéder de nouveau au rinçage de la sonde

Entretien du matériel

Pour l'entretien de la pompe et de l'environnement utiliser un détergent-désinfectant (normes : NF EN 13727, NF EN 13624)

- Éliminer les déchets selon protocole en vigueur dans l'établissement


On récapitule : les étapes essentielles




Mains sans bijoux
(alliance, bagues,
bracelets, montre),
vernis, faux ongles
Ongles court <1mm




Friction
hydroalcoolique
jusqu'à séchage
complet

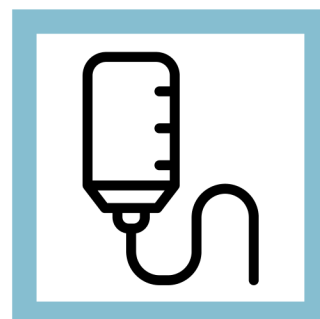


Préparer le matériel
Vérifier date de
péremption et état
de la poche
d'alimentation

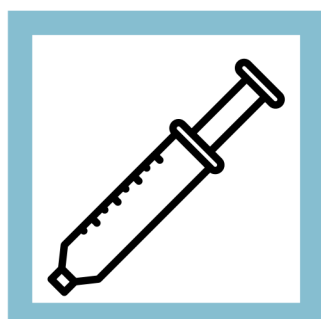

Vérifier que la sonde
n'est pas bouchée :
pas de résistance

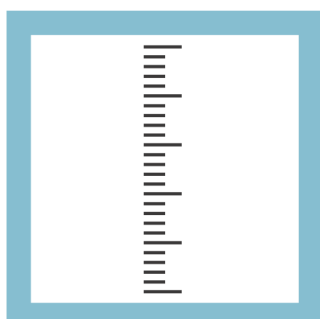

Brancher
l'alimentation

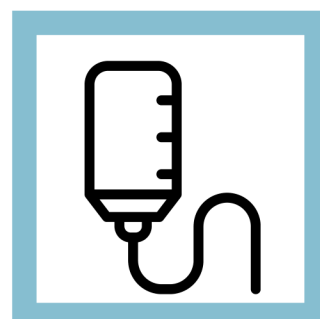

Régler la pompe
selon prescription
Vérifier le bon
écoulement de
l'alimentation



Effectuer la traçabilité du soin dans le dossier de la personne accompagnée

Références

Guide de bonnes pratiques de traitement des dispositifs médicaux réutilisables, SF2H, 2023

Soins et surveillance des abords digestifs pour l'alimentation entérale chez l'adulte en hospitalisation et à domicile, ANAES, 2000

- membres groupes de travail : Corinne Souhait, directrice des soins, APBA ; Ivana Novakova, cadre hygiéniste, Adef Résidence; Adeline Saguier, IDE, MAS foyer Monteclair; Carine Kalt, IMH GHRMSA; Nathalie Jouzeau, IDE PCI ; Carole Dumas, IBODE PCI; Marina Pereira-Colot, IDE PCI; CPias GE
- relecture : Habibé Akcay, IDE PCI, clinique de Limoges